

>> Serie de Flujo Bajo

Dializador de Fibra Hueca



Sede Corporativa

SHANDONG WEIGAO BLOOD PURIFICATION PRODUCTS CO., LTD.
Tel: +86 631 5660598 Fax: +86 631 5660598

Sede Corporativa de Negocio Internacional

WEGO HEALTHCARE (SHENZHEN) CO., LTD.

19F, Building 3, Sunmax Technology Plaza, No.8 Keyuan Road,
Nanshan District, Shenzhen, China
Tel: +86 755 33892500 Fax: +86 755 33892508
E-mail: info@wego-healthcare.com
www.wego-healthcare.com/en



“


El Mayor Fabricante de Hilado Independiente de Dializador en China

”

Características del producto


1 Diseño de extremo de corte liso

Reducir al máximo las adherencias y lesiones de las células sanguíneas.

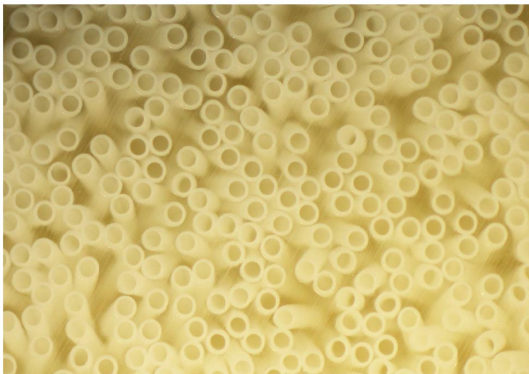


2 Fibra de membrana de polisulfona

La fibra de membrana de polisulfona, un material de uso general internacional, retiene la endotoxina y disminuye las reacciones microinflamatorias de los pacientes para garantizar una mejor biocompatibilidad.

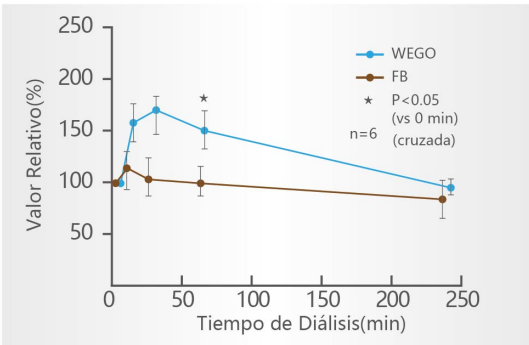

3 Diseño de fibras de microondas

La estructura única de ondulación dentro del dializador crea menos canalización de la diálisis para un flujo más homogéneo, un mejor transporte difusivo, y un mejor aclaramiento de moléculas pequeñas.

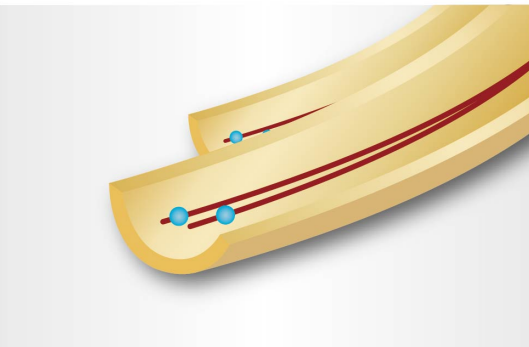

Especificaciones técnicas

	Rendimiento in vitro	F12	F13	F14	F16
	Coeficiente de ultrafiltración (mL/h • mmHg)	16	17	18	20
Q _B =200mL/min	Urea (mL/min)	180	185	190	195
	Creatinina (mL/min)	167	171	174	179
	Fosfato (mL/min)	147	152	156	162
	Vitamina B ₁₂ (mL/min)	97	101	105	113
Q _B =300mL/min	Urea (mL/min)	230	238	245	256
	Creatinina (mL/min)	213	219	224	232
	Fosfato (mL/min)	175	183	190	201
	Vitamina B ₁₂ (mL/min)	102	107	112	120
Q _B =400mL/min	Urea (mL/min)	257	267	276	291
	Creatinina (mL/min)	231	239	246	258
	Fosfato (mL/min)	195	205	213	225
	Vitamina B ₁₂ (mL/min)	108	114	119	129
	KoA Urea (mL/min)	629	698	767	902
	Área efectiva (m ²)	1.2	1.3	1.4	1.6
	Volumen de cebado (mL)	70	73	75	80

Condiciones de Prueba

Aclaramineto: Q_D=500mL/min; Q_F=0mL/min
KoA: Q_B=300mL/min, Q_D=500mL/min
Coeficiente de ultrafiltración: Sangre bovina, Proteína: 60±5g/L, PTM: 100mmHg

Grosor de la pared de Membrana / Diámetro interior	40µm/ 200µm	Material de membrana	Polisulfona
PTM máximo	500mmHg	Carcasa	Polycarbonato
Método de esterilización	Radiación	Compuesto de Encapsulado	Poliuretano
Embalaje	24 piezas / caja	Anillo de sellado	Silicona

Nota: Los productos de esta serie tienen un alto rendimiento de ultrafiltración y permeabilidad. Por favor, utilice sólo con equipos de diálisis con función de control de ultrafiltración.